

Contour.  
XT

Sustav za mjerenje  
glukoze u krvi




BEZ  
KODIRANJA

Kratke upute


## Glukometar CONTOUR®XT




### Koristite isključivo CONTOUR®NEXT test senzore

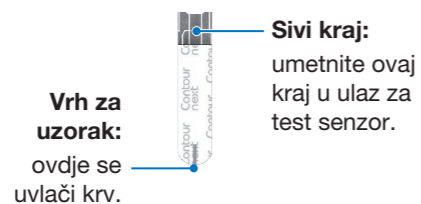

## Merilnik CONTOUR®XT

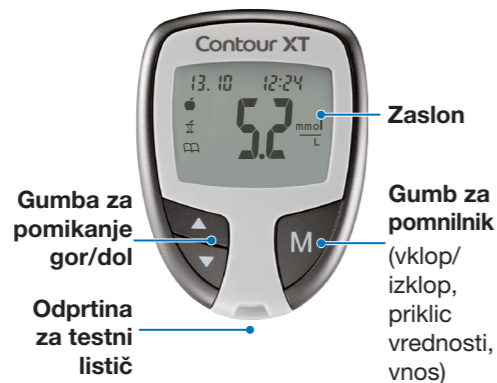



### Uporablja testne listiće CONTOUR®NEXT

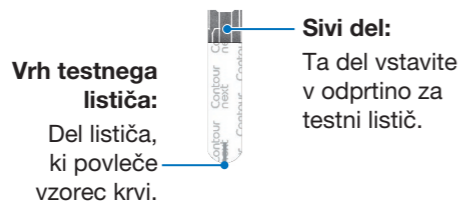


## Osnovno testiranje Cjelovite upute pogledajte u Uputama za uporabu glukometra CONTOUR®XT i u umetku lancetara. ⚠ OPREZ: Priloženi lancetar je namijenjen za uporabu samo na jednom pacijentu.

### Priprema za testiranje

1. Prije testiranja temeljito operite i osušite ruke.
2. Umetnite sivi kraj test senzora u ulaz za test senzor na glukometru.
3. Glukometar će se uključiti, a na zaslonu će se prikazati slika test senzora s treperećom kapljicom krvi, što je znak da je instrument spreman za testiranje.
4. Uklonite podesivi vrh s lancetara.
5. Olabavite okruglu zaštitnu kapicu na lanceti okretanjem za ¼ okreta, ali je nemojte skinuti.

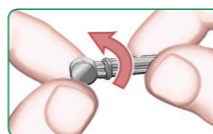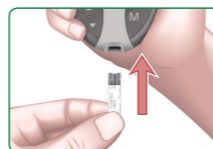

6. Umetnite lancetu čvrsto u lancetar dok ne dođe do kraja.

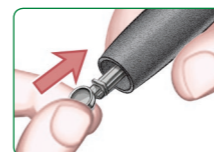

7. Odvrnite okruglu zaštitnu kapicu lancete.



8. Vratite vrh lancetara.



9. Podesite regulator dubine uboda na željenu dubinu uboda.



### Dobivanje kapljice krvi


1. Snažno pritisnite lancetar na mjesto uboda i pritisnite tipku za otpuštanje.



2. Trljajte ruku i prst u smjeru mjesta uboda kako bi se stvorila kapljica krvi.


### Testiranje krvi

1. Za rad glukometra CONTOUR®XT koristite isključivo CONTOUR®NEXT test senzore.
2. Vrhom test senzora dotaknite kapljicu krvi. Krv se uvlači u test senzor.
3. Držite vrh test senzora na kapljici krvi dok se glukometar ne oglasi zvučnim signalom.

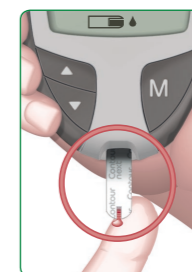

Testiranje iz jagodice prsta

4. Rezultat testiranja bit će prikazan nakon odbrojavanja 5 sekundi.
5. Izvadite test senzor kako biste isključili glukometar. Test senzor odložite u medicinski otpad.

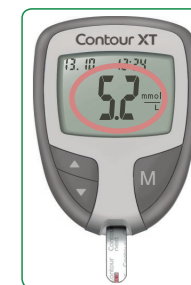

Za uklanjanje lancete iz lancetara, pogledajte detaljne upute u umetku lancetara.



Grafički prikaz lancetara je samo za ilustraciju.


Samo za in vitro dijagnostičku uporabu.

Trebate pomoć? Nazovite besplatni telefonski broj 0800 600 900  
www.diabetes.ascensia.com


## Izvedba meritve Preberite celotna navodila za uporabu sistema CONTOUR®XT in navodila, priložena sprožilni napravi. ⚠ OPOZORILO: Sprožilna naprava, ki je priložena kompletu, je namenjena za uporabo ene same osebe.

### Priprava na meritev

1. Pred meritvijo si umijte in osušite roke.
2. Testni listič s sivim delom naprej vstavite v odprtino na merilniku.
3. Merilnik se vklopi, na zaslonu se prikaže simbol testnega lističa z utripajočo kapljico, kar pomeni, da je merilnik pripravljen na meritev.
4. Odstranite pokrovček s sprožilne naprave.
5. Razrahljajte zaščitno kapico na lanceti tako, da jo zavrtite za ¼ obrata, vendar je ne odstranite.

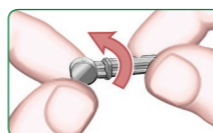


6. Lanceto potisnite v odprtino, dokler se popolnoma ne ustavi.

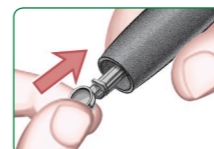


7. Odvijte zaščitno kapico lancete.



8. Zhova namestite pokrovček.

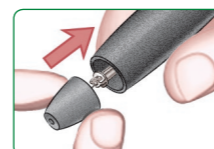

9. Z vrtljivim gumbom na pokrovčku nastavite željeno globino vboda.

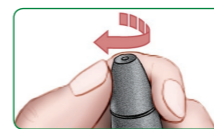

### Pridobivanje kapljice krvi


1. Sprožilno napravo pritisnite na mesto vboda in pritisnite sprožilni gumb.



2. Dlan masirajte v smeri prsta do mesta vboda, da pridobite kapljico krvi.


### Izvedba meritve

1. Z merilnikom CONTOUR®XT uporabljajte le testne listiće CONTOUR®NEXT.
2. Z vrhom testnega lističa se dotaknite kapljice krvi. Testni listič vsrka kri.
3. Vrh testnega lističa držite v stiku s kapljico, dokler merilnik ne zapiska.

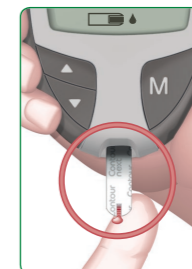

Meritve iz prstne blazinice

4. Rezultat se prikaže po 5-sekundnem odštevanju.
5. Merilnik izklopite tako, da izvlčete testni listič. Testni listič zavrzite kot infektivni odpad.

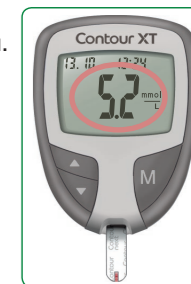

Če želite lanceto odstraniti iz sprožilne naprave, preberite podrobna navodila, priložena sprožilni napravi.



Slike sprožilne naprave so simbolične in morda niso enake vaši sprožilni napravi.

Samo za in vitro diagnostično uporabo.

Potrebujete pomoć? Pokličite 080 1880.  
www.diabetes.ascensia.com

## Šifre pogrešaka i simboli

Potpuni popis šifri pogrešaka pogledajte u Uputama za uporabu.

<b>E1</b>	Temperatura izvan dopuštenog raspona.
<b>E2</b>	Problem punjenja test senzora. Ponovite testiranje novim test senzorom.
<b>E3</b>	Glukometer je detektirao iskoristeni test senzor ili je korištena pogrešna kontrolna otopina. Ponovite testiranje novim test senzorom.
<b>E11</b>	Rezultat izvan granica normale. Ponovite testiranje novim test senzorom.

Zastupnik i distributer za RH:  
MEDILAB d.o.o.  
Hondlova 2/9  
10 000 Zagreb  
Republika Hrvatska  
Tel.: +385 1 2356 730  
Besplatni tel.: 0800 600 900  
Faks: +385 1 2356 700  
diabetes@medilab.hr  
www.medilab.hr  
**www.diabetes.ascensia.com**

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

**ASCENSIA**  
Diabetes Care



85567551  
Rev. 10/16

## Kode napak in simboli

Celoten seznam napak najdete v navodilih za uporabo.

<b>E1</b>	Temperatura zunaj obsega.
<b>E2</b>	Testni listič ni dovolj napolnjen s krvjo. Ponovite meritev z novim testnim lističem.
<b>E3</b>	Merilnik je zaznal uporabljeni testni listič ali napačno kontrolno tekočino. Ponovite meritev z novim testnim lističem.
<b>E11</b>	Nepravilen rezultat. Ponovite meritev z novim testnim lističem.

Distributer za Slovenijo:  
Zaloker & Zaloker d.o.o.  
Kajuhovala ulica 9  
1000 Ljubljana  
Slovenija  
Tel.: 01 542 51 11  
Brezplačni tel.: 080 1880  
info@zaloker-zaloker.si  
www.zaloker-zaloker.si  
**www.diabetes.ascensia.com**

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

**ASCENSIA**  
Diabetes Care



85567551  
Rev. 10/16

## Napredni način rada

### Postavljanje glukometra na napredni način rada

Da biste postavili glukometer na napredni način rada i iskoristili prednosti oznaka obroka te druge dostupne značajke:

1. Pritisnite **M** da biste uključili glukometer.
2. Pritisnite i držite **▲** ili **▼** 3 sekunde.
3. Zatreperit će L-1.
4. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste promijenili na L-2.
5. Pritisnite **M** za postavljanje.



**Doznajte kako vam ove dodatne značajke mogu pomoći u regulaciji dijabetesa. Obratite se službi za korisnike tvrtke MEDILAB d.o.o. na besplatni telefonski broj 0800 600 900.**  
**www.diabetes.ascensia.com**  
**www.patents.ascensia.com**

### Nakon provedenog testiranja i pregleda rezultata, koristite oznake na zaslonu:

ZA OZNAČAVANJE REZULTATA	→ PRIKAŽUJE SE	→ ZA POSTAVLJANJE	→ PRIKAŽUJE SE	→ ŠTO TO ZNAČI	→ KORIŠTENJE PODSJETNIKA
<b>Prije obroka</b> Označava rezultat testa koji je proveden prije obroka. Pritisnite <b>▲</b> ili <b>▼</b>		(treperi)	Pritisnite <b>M</b>		Rezultat je označen kao test prije obroka. Ponovno pritisnite <b>M</b> da biste postavili podsjetnik za provođenje testa iza obroka.
<b>Iza obroka</b> Označava rezultat testa koji je proveden iza obroka. Pritisnite <b>▲</b> ili <b>▼</b>		(treperi)	Pritisnite <b>M</b>		Rezultat je označen kao test iza obroka.
<b>Dnevnik</b> Označava bilo koji rezultat koji je jedinstven ili na neki način različit. Pritisnite <b>▲</b> ili <b>▼</b>		(treperi)	Pritisnite <b>M</b>		Rezultat je označen u memoriji kao jedinstven. To trebate to zabilježiti u vašem dnevniku samokontrole.
Postavlja podsjetnik (unaprijed postavljen na 2 sata) za provođenje testa iza obroka. Potpune upute o načinu korištenja oznaka i prilagođavanju vremena podsjetnika pogledajte u Uputama za uporabu.					

Nakon oglašavanja podsjetnika glukometer se uključuje i prikazuje se rezultat testa prije obroka.



Pritisnite bilo koju tipku jednom da biste isključili podsjetnik ili dvaput da biste isključili glukometer.  
Provedite novo testiranje krvi i obilježite ga oznakom testa Iza obroka (pogledajte tablicu lijevo).

## Potencijalna biološka opasnost

Svi sustavi za mjerenje glukoze u krvi smatraju se biološki opasnim.

Zdravstveni djelatnici ili osobe koje koriste ovaj sustav na više pacijenata trebaju slijediti postupak za kontrolu zaraze koji je propisala njihova ustanova.

Svim proizvodima ili predmetima koji dolaze u doticaj s ljudskom krvlju, čak i nakon čišćenja, potrebno je rukovati kao da mogu prenijeti zarazne bolesti.

Korisnik treba poštivati preporuke zdravstvenih ustanova za sprječavanje prijenosa bolesti koje se prenose krvlju, a koje se odnose na potencijalno zarazne ljudske uzorke.

Cjelovite upute pogledajte u Uputama za uporabu.


© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava pridržana. Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts i logotip No Coding (Bez kodiranja) su zaštitni znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

## Napredni način delovanja

### Vklop naprednega načina delovanja

Napredni način delovanja vam omogoča uporabo označevalnikov za obroke in drugih uporabnih funkcij:

1. Pritisnite gumb **M**, da vklopite merilnik.
2. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb **▲** ali **▼**.
3. Utripati začne zapis L-1.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da vklopite napredni način L-2.
5. Pritisnite **M** za potrditev.

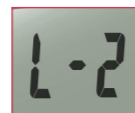

**Poskusite, kako lahko s pomočjo dodatnih funkcij izboljšate vodenje svoje sladkorne bolezni. Pokličite pomoč uporabnikom: 080 1880**

**www.diabetes.ascensia.com**  
**www.patents.ascensia.com**

### Uporaba označevalnikov po izvedeni meritvi:

OZNAČEVALNIKI	→ SIMBOL	→ POTRDITEV	→ PRIKAZ	→ POMEN	→ OPOMNIK
<b>Pred obrokom</b> Označuje rezultat meritve, opravljene pred obrokom. Pritisnite <b>▲</b> ali <b>▼</b>		(utripa)	Pritisnite <b>M</b>		Rezultat je označen z oznako pred obrokom. Znova pritisnite <b>M</b> za nastavitev opomnika za meritev po obroku.
<b>Po obroku</b> Označuje rezultat meritve, opravljene po obroku. Pritisnite <b>▲</b> ali <b>▼</b>		(utripa)	Pritisnite <b>M</b>		Rezultat je označen z oznako po obroku.
<b>Dnevnik</b> Označuje poseban rezultat, ki napoti na opombo v dnevniku. Pritisnite <b>▲</b> ali <b>▼</b>		(utripa)	Pritisnite <b>M</b>		Označuje poseban rezultat, ki ga pojasnite v dnevniku.
Nastavi opomnik (prednastavljen na 2 uri) za meritev po obroku. Podrobne napotke za uporabo označevalnikov in opomnikov najdete v navodilih za uporabo.					

Ko se oglasi opomnik, se merilnik vklopi in prikaže rezultat meritve pred obrokom.



Z enim pritiskom na katerikoli gumb tišate opomnik, z dvema pritiskoma izklopite merilnik.  
Opravite meritev glukoze in jo označite z oznako po obroku (glejte preglednico levo).

## Potencialna biološka nevarnost

Vsi sistemi za merjenje glukoze v krvi se obravnavajo kot biološko nevarni.

Zdravstveni delavci, ki ta sistem uporabljajo za več bolnikov, morajo ravnati skladno s postopkom za obvladovanje okužb, ki velja v njihovi ustanovi.

Z vsemi izdelki ali predmeti, ki pridejo v stik s človeško krvjo, je treba tudi po čiščenju ravnati kot z morebitnimi prenašalci okužb.

Uporabnik mora upoštevati priporočila za preprečevanje nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s krvjo, kot je priporočeno za potencialno kužne človeške vzorce v zdravstvenem okolju.

Podrobnejša navodila najdete v navodilih za uporabo.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Vse pravice pridržane. Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts in logotip No Coding (Brez kodiranja) so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG.